


Vaskuläre Intervention // Koronar

# Galeo

Koronarer Führungsdraht

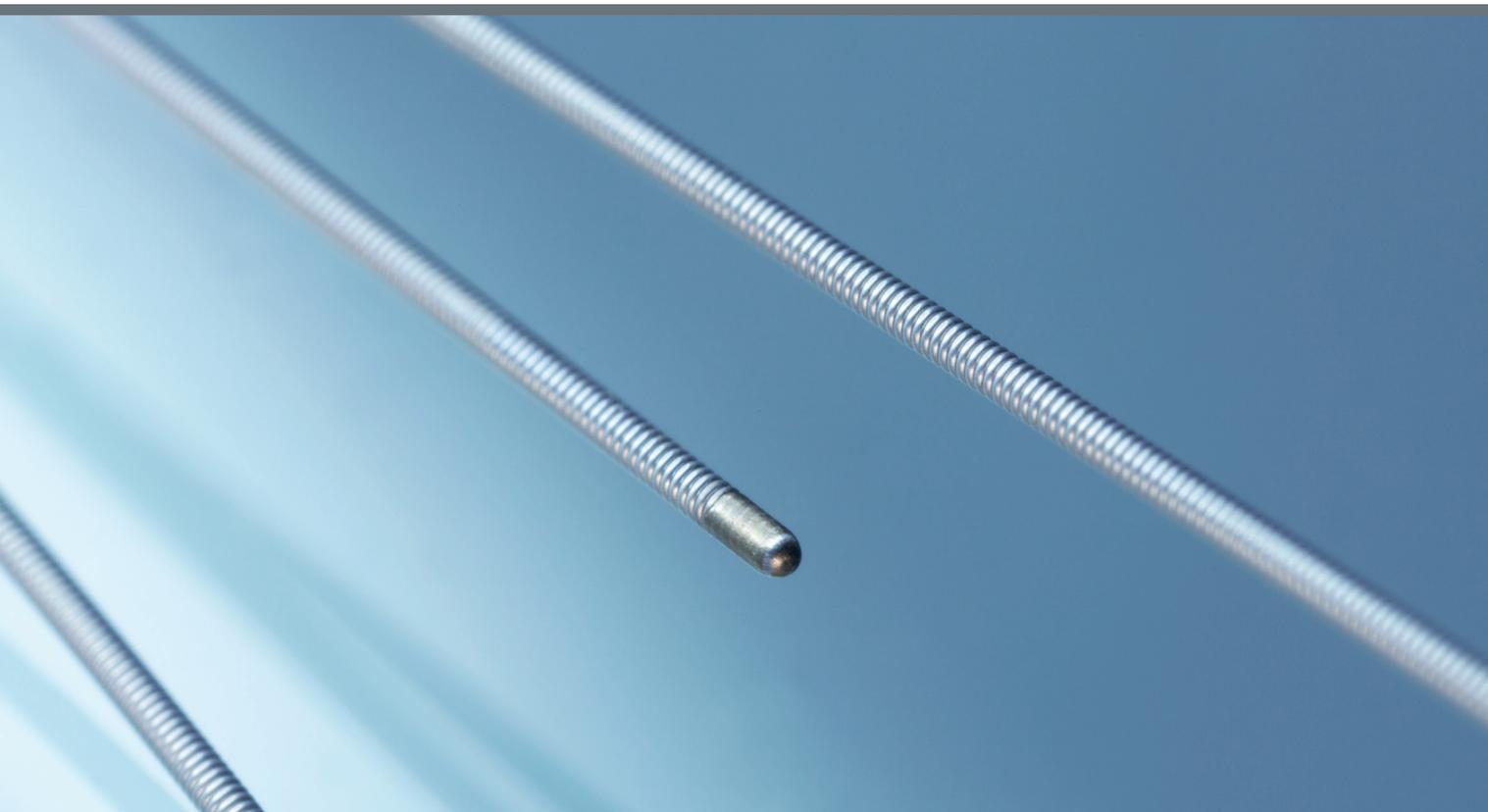


- Hydrophobe Beschichtung für ein optimales taktiles Feedback
- Ideales Drehmomentverhalten für präzise Steuerbarkeit
- Breite Auswahl an Spitzensteifigkeiten und Unterstützungsgraden

# Galeo Führungsdraht – Nicht nur ein Draht ...

Das Geheimnis des einzigartigen “Fingerspitzengefühls” des Galeo ist die Kombination aus der revolutionären CTP (Controlled Transmission Platform), einer einteiligen Kerndrahtkonstruktion und der hydrophoben distalen Beschichtung.

## Femorale und radiale Schaftmarkierungen

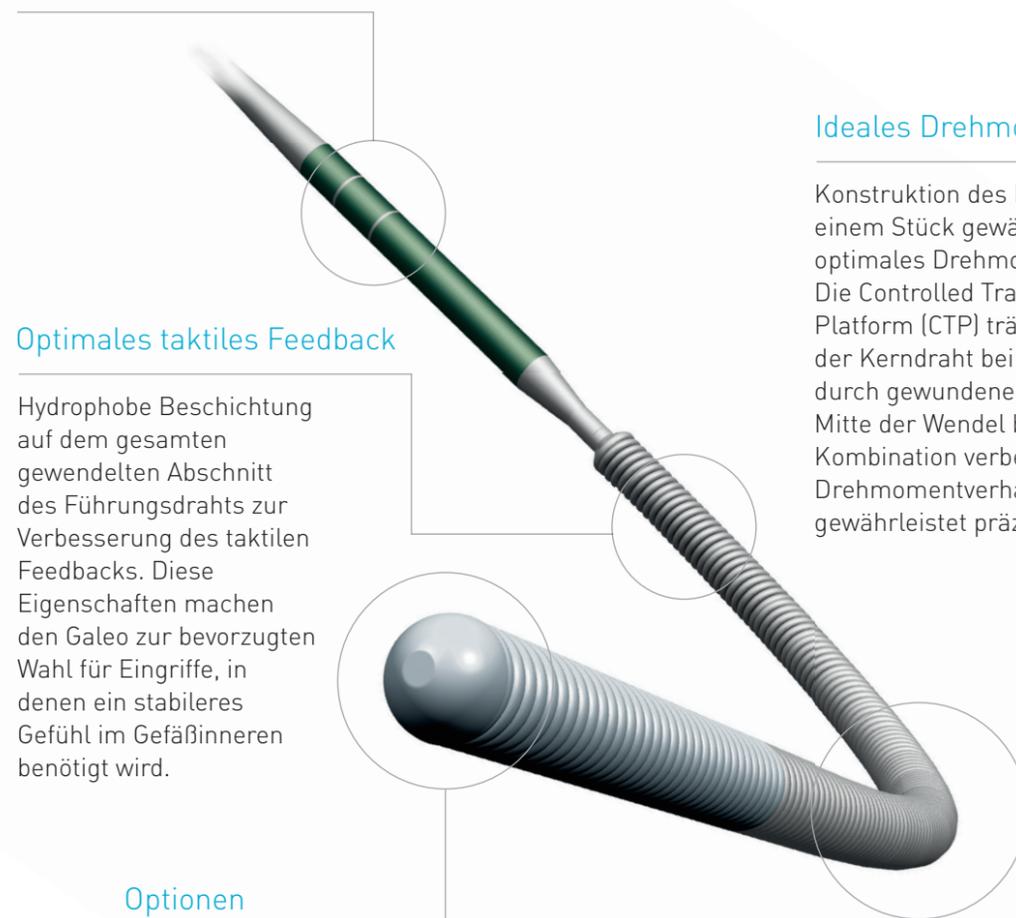

## Optimales taktiler Feedback

Hydrophobe Beschichtung auf dem gesamten gewendelten Abschnitt des Führungsdrahts zur Verbesserung des taktilen Feedbacks. Diese Eigenschaften machen den Galeo zur bevorzugten Wahl für Eingriffe, in denen ein stabileres Gefühl im Gefäßinneren benötigt wird.


## Optionen

Breites Sortiment an Führungsdrähten mit verschiedenen Spitzensteifigkeiten und Unterstützungsgraden für die unterschiedlichsten klinischen Ansprüche.

## Ideales Drehmomentverhalten


Konstruktion des Kerndrahts aus einem Stück gewährleistet ein optimales Drehmomentverhalten. Die Controlled Transmission Platform (CTP) trägt dazu bei, dass der Kerndraht bei der Navigation durch gewundene Gefäße in der Mitte der Wendel bleibt. Diese Kombination verbessert das Drehmomentverhalten und gewährleistet präzise Steuerbarkeit.

# ... sondern die Verlängerung Ihrer Fingerspitzen

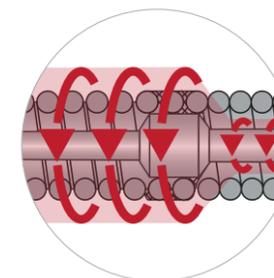


## Controlled Transmission Platform (CTP)

Die direkte Verbindung zwischen dem Kerndraht und der distalen Wendel.

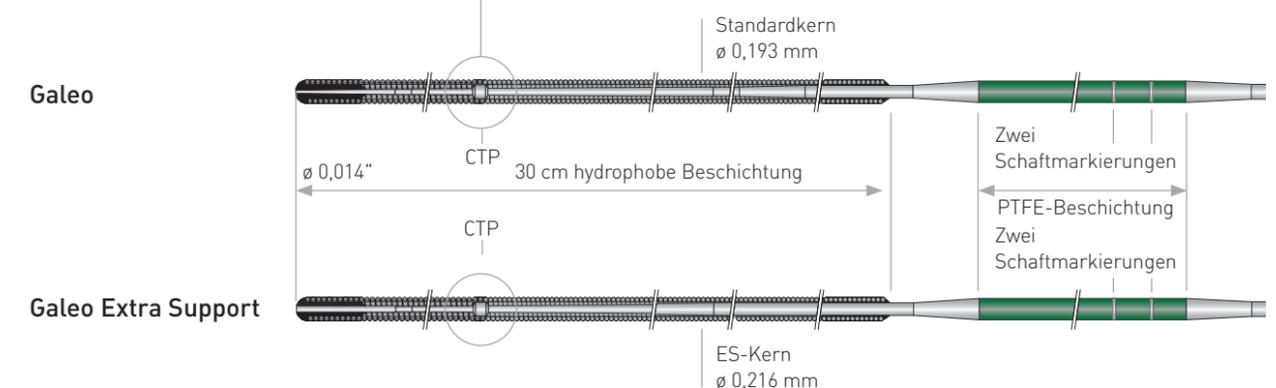

**Der Galeo EW (Extension Wire)** ermöglicht die schnelle und zuverlässige Verlängerung des Galeo und Galeo Pro Führungsdrahts um weitere 150 cm. Führungsdraht und Verlängerung lassen sich mühelos auseinanderziehen, um die ursprüngliche Länge des Führungsdrahts wiederherzustellen.

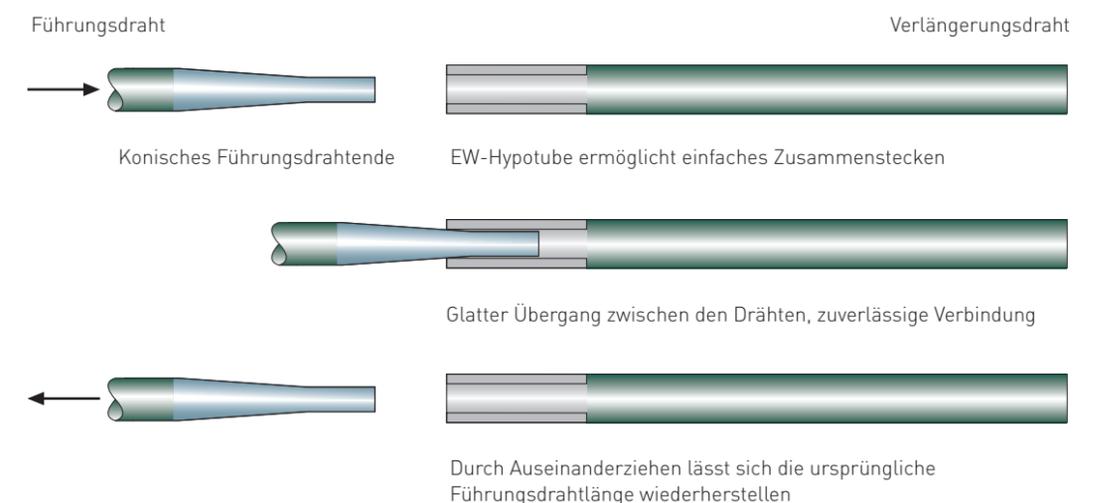

# Galeo

## Koronarer Führungsdraht

Technische Daten	Führungsdraht	
	Durchmesser	0,014"
	Länge	190 cm
	Kerndrahtmaterial	Edelstahl
	Proximale Wendel	27,4 cm, Edelstahl
	Distale Wendel	26 mm, Palladium, röntgensichtbar
	Proximale (Schaft-)beschichtung	PTFE
	Distale Beschichtung	Hydrophob (30 cm)
	Flexibilität der Spitze	hoch flexibel (HF), flexibel (F), mittel (M)
	Unterstützungsgrade	Standard und ES (Extra Support)
	Schaftmarkierungen	92 cm und 102 cm vom distalen Ende

Bestellinformation	Bestellnummer	Spitzenform	Flexibilität der Spitze	Farbe des Etiketts	Unterstützungsgrad	Länge
<b>Galeo Führungsdrähte</b>						
	406886	gerade	hochflexibel	■ rot	Standard	190 cm
	406887	gerade	flexibel	■ orange	Standard	190 cm
	406888	gerade	mittel	■ blau	Standard	190 cm
	406889	gerade	flexibel	■ gelb	Extra Support	190 cm
<b>Galeo EW (Verlängerungsdraht)</b>						
	406890			■ violett		150 cm

Galeo ist Teil der koronaren BIOTRONIK Therapielösungen:

- Stents: Orsiro, PRO-Kinetic Energy, PK Papyrus ■ Ballons: Pantera Lux, Pantera LEO, Pantera Pro, AngioSculpt
- Führungsdrähte: Galeo Pro, Cruiser/Cruiser Hydro, Magnum

Hersteller:  
 Concert Medical, LLC  
 77 Accord Park Dr.  
 Norwell, MA 02061 -1605 · USA  
 Tel +1 (781)871 7882  
 info@concertmedical.com  
 www.concertmedical.com

Vertrieb:  
 BIOTRONIK AG  
 Ackerstrasse 6  
 8180 Bülach · Schweiz  
 Tel +41 (0)44 8645111  
 Fax +41 (0)44 8645005  
 info.vi@biotronik.com  
 www.biotronik.com

Ihr lokaler BIOTRONIK Außendienstmitarbeiter nimmt  
 Ihre Bestellung gerne entgegen.