





Hohe
Vorschubfähigkeit

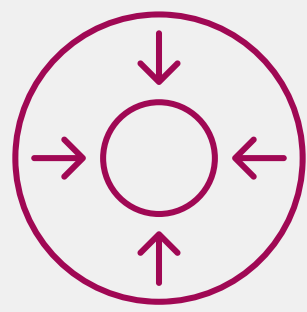

Geringes Profil und
umfangreiches
Größenportfolio

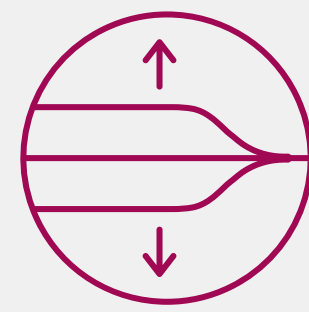

Kontrollierte
Compliance




Technische Daten /
Bestellinformationen

Vaskuläre Intervention // **Peripher**
PTA-Ballonkatheter/0,018"/OTW



 **BIOTRONIK**
excellence for life

Passeo-18

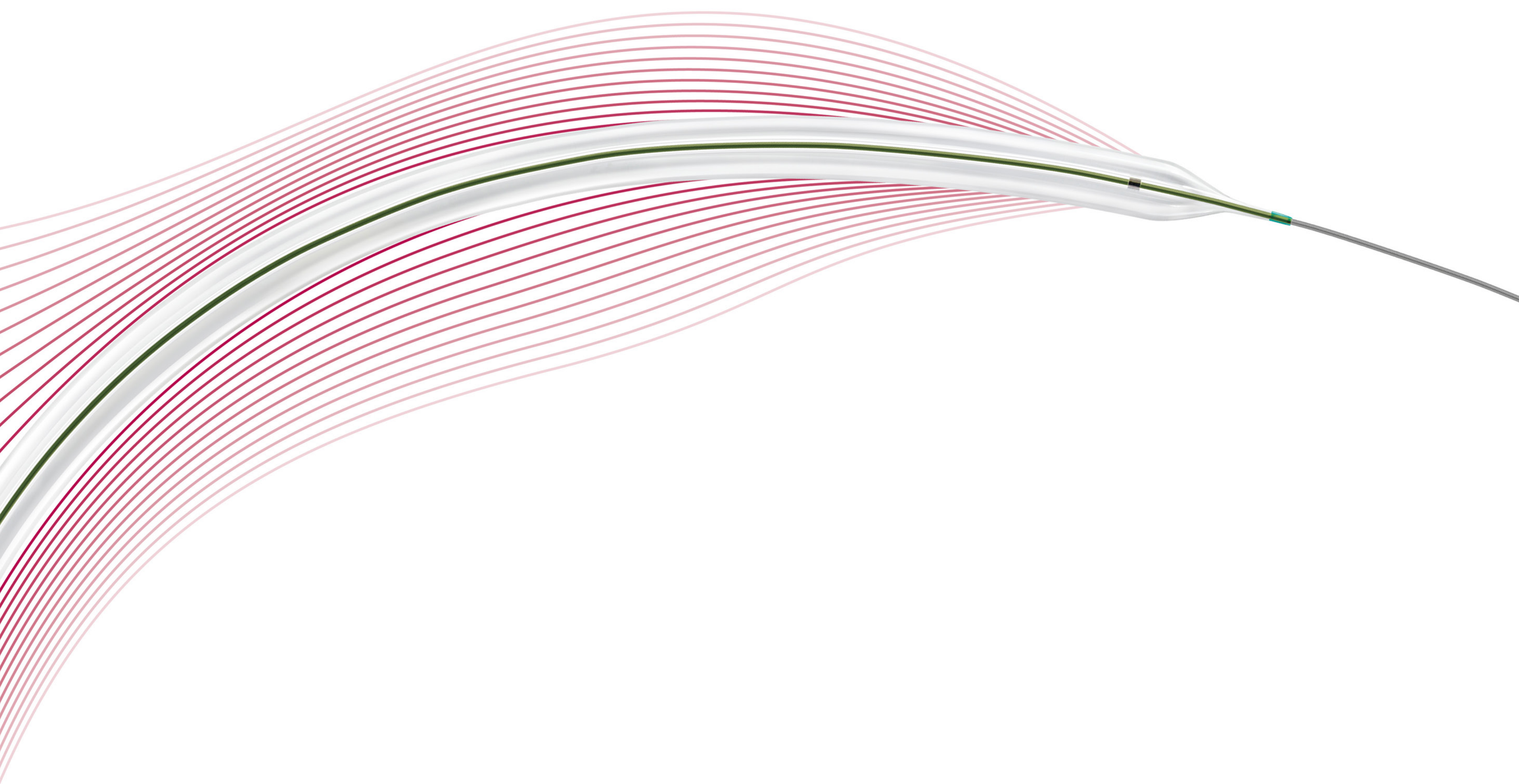

Koaxialschaftdesign ermöglicht hohe Vorschubfähigkeit

Der starke Innenschaft und der flexible Außenschaft sorgen für ein hervorragend verschiebbares und platzierbares System.

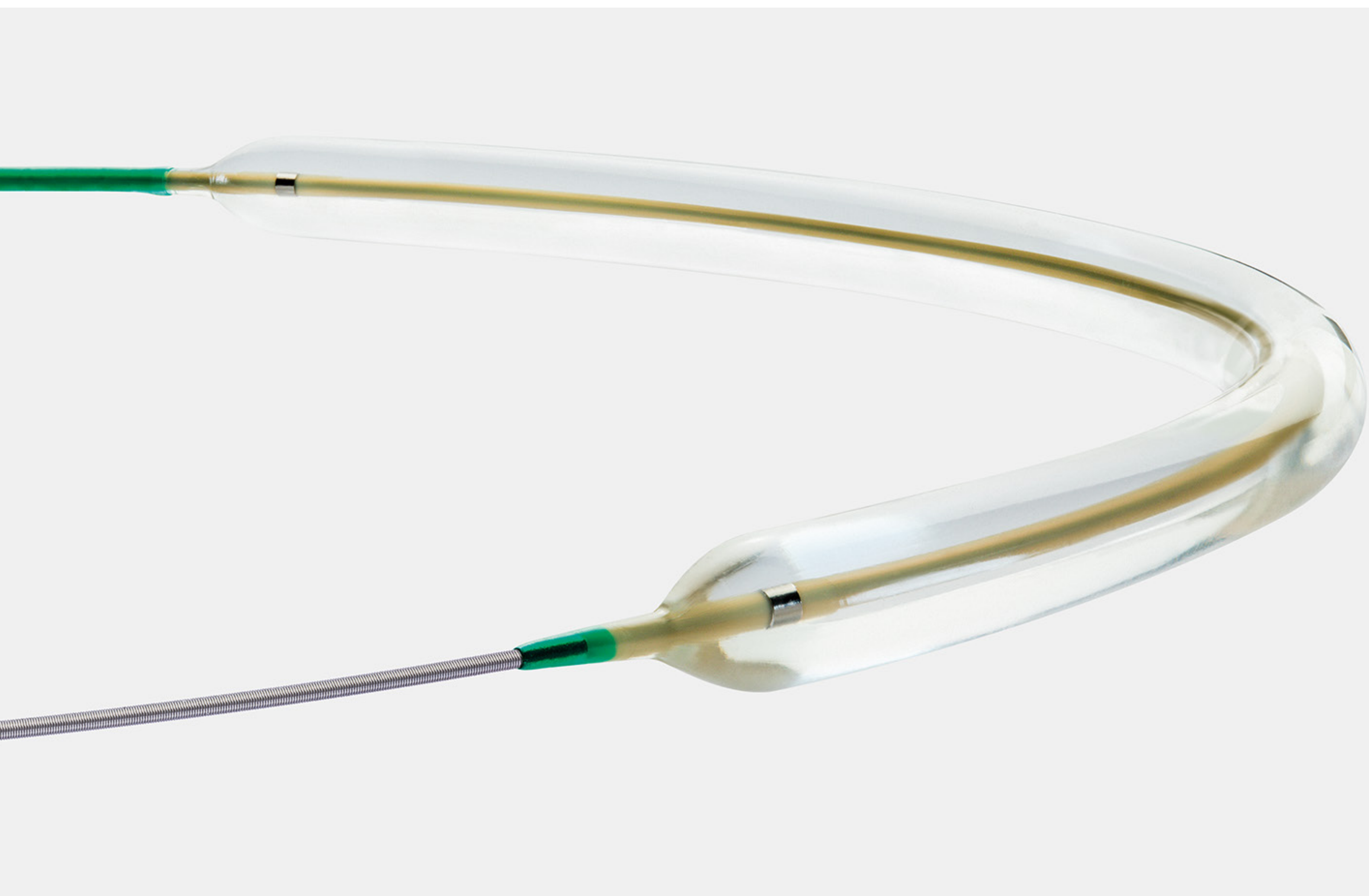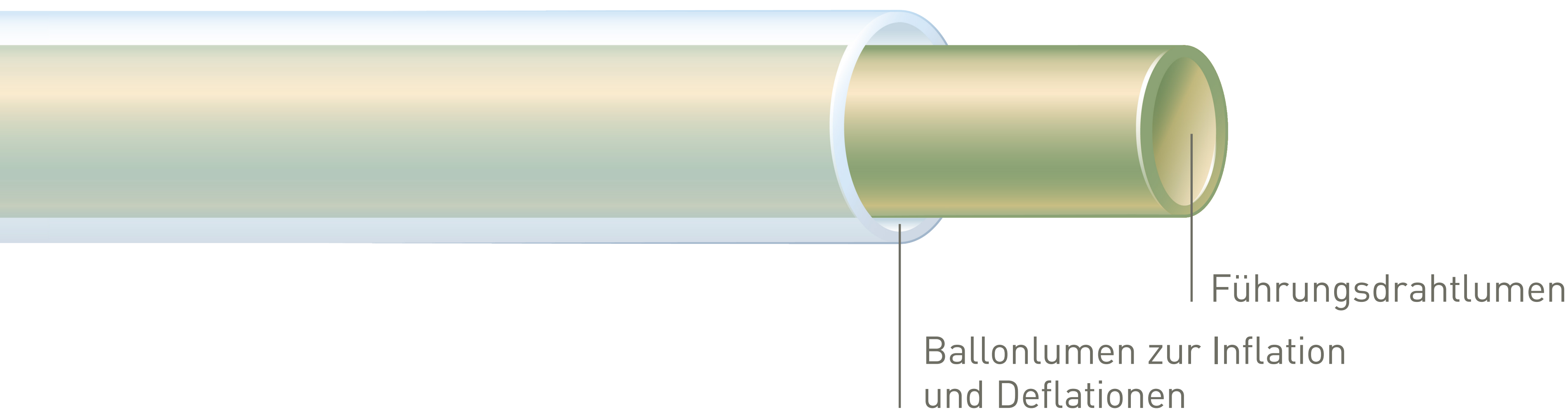

Geringes Profil und umfangreiches Größenportfolio

Das verfügbare koaxiale 3,8F-Katheterschafttdesign mit geringem Profil erleichtert den Zugang zu distalen Läsionen und minimiert Komplikationen an der Zugangsstelle¹.

Erhältliche Ballondurchmesser/-längen

ø 2,0 - 5,0 mm



ø 6,0 mm - 7,0 mm



0 20 40 60 80 120 150 170 200


Ballonlänge (mm)

Kontrollierte Compliance für planbare Ballonaufdehnung

Niedrige, kontrollierte Compliance für eine planbare radiale Ballonaufdehnung, um das Dissektionsrisiko zu minimieren.

Patchwork-Beschichtung für verbesserte Passierfähigkeit

Der 5-fach gefaltete Ballon ist im gefalteten Zustand vollständig beschichtet. Bei der Inflation werden die unbeschichteten Ballonabschnitte freigelegt. Dies soll die Passage erleichtern und gleichzeitig das Verrutschen bei der Inflation minimieren.

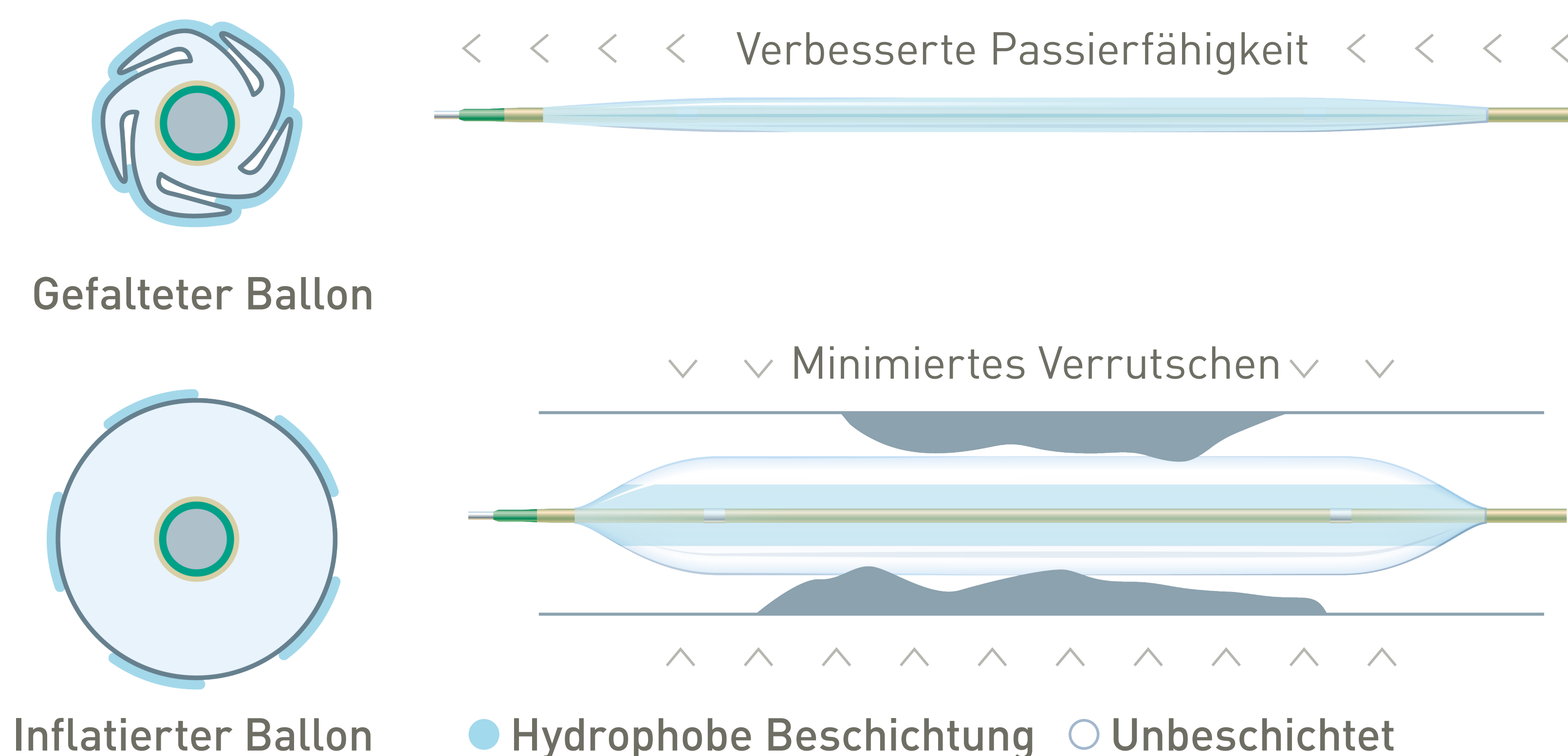


404754/D/Jan_2018_DV

Passeo-18

Indiziert für die Aufweitung von Stenosen in den femoralen, poplitealen und infrapoplitealen Arterien und für die Behandlung von obstruktiven Läsionen nativer oder synthetischer arteriovenöser Dialysefsteln.

Vascular
Intervention
Peripheral

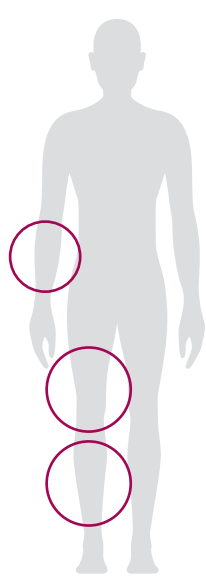

Technische Daten		Ballonkatheter	
		Kathetertyp	OTW
		Empfohlener Führungsdraht	0,018"
		Spitze	Kurz und verjüngt, farbig
		Ballonmaterial	SCP (Semikristallines Polymer), kontrollierte Compliance (4 - 8 %)
		Faltung des Ballons	5-fach
		Ballonbeschichtung	Hydrophobe Patchwork-Beschichtung
		Ballonmarker	2 eingebettete Marker (Nullprofil)
		Größen	ø 2,0 - 7,0 mm; L: 20 - 200 mm
		Schaft	3,8F, 3,9F (ø 6,0/7,0 mm x 170 - 200 mm); Koaxialdesign
		Arbeitslänge	90, 130 und 150 cm

Compliance-Tabelle		Ballondurchmesser x Länge (mm)							
		ø 2,0 x 20-170	ø 2,0 x 200	ø 2,5 x 20-170	ø 2,5 x 200	ø 3,0 x 20-170	ø 3,0 x 200	ø 3,5 x 20-170	ø 3,5 x 200
Nominaldruck (NP)	atm*	6	6	6	6	6	6	6	6
	ø (mm)	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5
Berstdruck (RBP)	atm*	15	14	15	14	15	14	15	14
	ø (mm)	2,1	2,1	2,6	2,6	3,2	3,2	3,7	3,7

		Ballondurchmesser x Länge (mm)						
		ø 4,0 x 20-150	ø 4,0 x 170-200	ø 5,0 x 20-120	ø 5,0 x 150	ø 5,0 x 170-200	ø 6,0 x 20-200	ø 7,0 x 20-200
Nominaldruck (NP)	atm*	6	6	6	6	6	6	6
	ø (mm)	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	6,0	7,0
Berstdruck (RBP)	atm*	15	13	15	12	13	12	12
	ø (mm)	4,3	4,2	5,3	5,2	5,2	6,2	7,3

*1 atm = 1,013 bar

Bestellinformationen		Katheter Länge (cm)	Ballon ø (mm)	Ballon Länge (cm)	20	40	60	80	120	150	170	200
4F	Antegrader Ansatz	90	2,0		366098	366099	366100	366104	366105	366106	366114	376276
		90	2,5		357451	357458	366101	357469	357476	366107	357483	376277
		90	3,0		357452	357459	366102	357470	357477	366108	357484	376278
		90	3,5		357453	357460	366103	357471	357478	366109	357485	376279
		90	4,0		357454	357461	357465	357472	357479	366110	376272	376280
		90	5,0		357455	357462	357466	357473	357480	366111	376273	376281
		90	6,0		357456	357463	357467	357474	357481	366112	376274	376282
		90	7,0		357457	357464	357468	357475	357482	366113 ^a	376275 ^a	376283 ^a
5F	Antegrader Ansatz											
4F	Retrograder Ansatz	150	2.0		366115	366118	366119	366123	366126	366129	366137	376296
		130	2.5		357486	357491	366120	357502	357507	366130	357512	376297
		130	3.0		357487	357492	366121	357503	357508	366131	357513	376298
		130	3.5		357488	357493	366122	357504	357509	366132	357514	376299
		130	4.0		357489	357494	357498	357505	357510	366133	376292	376300
		130	5.0		357490	357495	357499	357506	357511	366134	376293	376301
		130	6.0		366116	357496	357500	366124	366127	366135	376294	376302
		130	7.0		366117	357497	357501	366125	366128	366136 ^a	376295 ^a	376303 ^a
5F	Retrograder Ansatz											

*nur auf Vorbestellung mit 8 Wochen Vorlaut

1. Bosiers M, Deloose K, Callaert J, et al. 4-French-compatible endovascular material is safe and effective in the treatment of femoropopliteal occlusive disease: results of the 4-EVER trial. J Endovasc Ther. 2013; 20: 746–756.